


CHOLESTEROL OXIDASE [CON II]

Liquid type

from *Rhodococcus* sp.

(Cholesterol: oxygen oxidoreductase, EC 1.1.3.6)

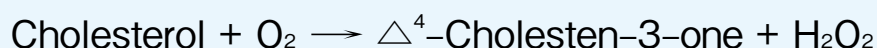

Preparation and Specification

Appearance : Yellowish solution
Specific activity : More than 500 U/ml

Properties

Substrate specificity	: See Table 1	
Molecular weight	: 61.8 KDa (SDS-PAGE)	
Isoelectric point	: pH 4.5	
Michaelis constant	: Cholesterol $6.0 \times 10^{-5}\text{M}$	
Optimum pH	: 7.0-7.5	Figure 1
pH stability	: 5.7-7.8 (65°C, 10 min)	Figure 2
Optimum temperature	: 50°C (Tris-HCl buffer)	Figure 3
Thermal stability	: Stable at 65°C and below (pH 7.0, 10 min)	Figure 4 and Figure 5
Effects of detergents	: See Table 2	

Applications for Diagnostic Test

This enzyme is useful for enzymatic determination of **total cholesterol**, **HDL-C**, and **LDL-C** when coupled with cholesterol esterase (T-18 and T-98).

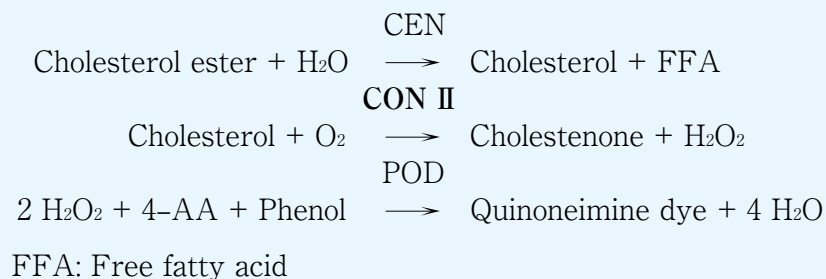



Table 1. Substrate specificity

Substrate (1mM)	Relative activity (%)
Cholesterol	100
β -Cholesterol	93
Pregnenolone	98
Dehydro-iso-androsterone	10
β -Sitosterol	94
Stigmasterol	66
Androsterol	2
Teststerone	1
Cholic acid	3

Table 2. Effect of detergents on CON II activity


Detergents (0.1%)	Relative activity (%)
Triton X-100	100
Emulgen 810	101
Emulgen 911	113
Emulgen 709	107
Emulgen 109P	118
AdekatoI B-797	103
AdekatoI SO-120	100
AdekatoI 720N	114
RHEODOL 460	63
SM 1080	122

Fig.1 pH Optimum

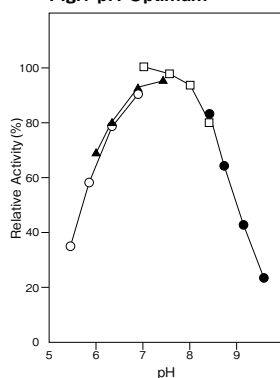


○ : MES buffer
 ▲ : PIPES buffer
 □ : Tris-HCl buffer
 ● : Glycine-NaOH buffer

Fig.2 pH Stability

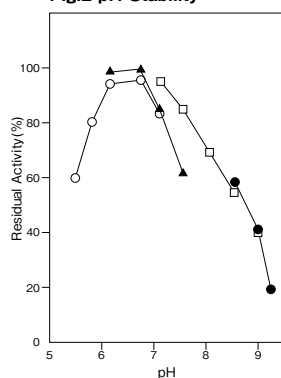


65°C, 10 min.
 ○ : MES buffer
 ▲ : PIPES buffer
 □ : Tris-HCl buffer
 ● : Glycine-NaOH buffer

Fig.3 Optimum Temperature

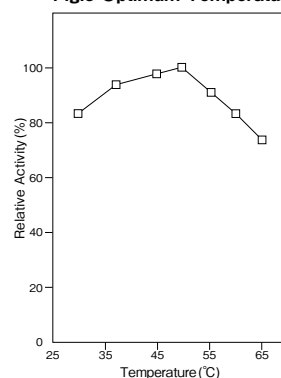


pH 7.0
 100 mM Tris-HCl buffer

Fig.4 Thermal Stability

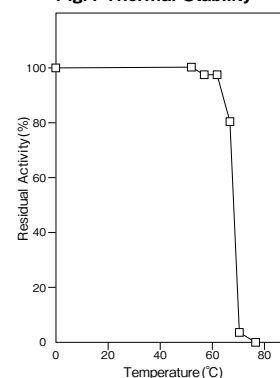

pH 7.0, 10 min.
 100 mM Tris-HCl buffer

Fig.5 Thermal Stability

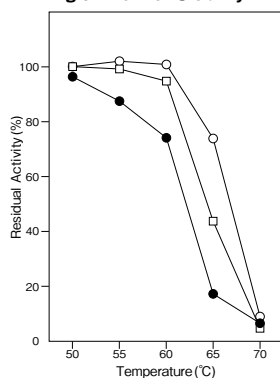


100mM, 10min.
 ○ : MES buffer(pH5.95)
 □ : Tris-HCl buffer(pH7.63)
 ● : Glycine-NaOH buffer(pH8.95)

Assay

Principle

The assay is based on the increase in absorbance at 240 nm as Δ^4 -cholesten-3-one is produced in the following reactions:

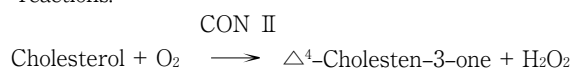

Unit definition

One unit is defined as the amount of enzyme which liberates 1 μ mole of Δ^4 -cholesten-3-one per minute at 37°C under the conditions specified in the assay procedure.

Reagents

- Substrate solution (6 mM cholesterol solution)
 Dissolve 232 mg of cholesterol with isopropanol to make a total of 100 ml.

2. Enzyme dilution buffer
0.1 M KH_2PO_4 - Na_2HPO_4 buffer pH 7.0 containing
0.05% (W/V) Triton X-100
3. Reagents
Cholesterol : NACALAI TESQUE, INC. Special grade
#08721
Triton X-100 : The Dow Chemical Company

■ Enzyme solution

Dilute accurately 0.5 ml of the sample with enzyme dilution buffer to make a 40-fold solution. Dilute it with enzyme dilution buffer to adjust the concentration to within 0.1-0.2 U/ml.

■ Procedure

1. Pipette accurately 3.0ml of enzyme dilution buffer and 50 μl of enzyme solution and preincubate at 37°C.
※ In the case of a test blank, add 50 μl of enzyme dilution buffer in place of enzyme solution.
2. After 5 min, add 50 μl of substrate solution and mix to start the reaction at 37°C.
3. After starting the reaction, measure the rate of increase per minute in absorbance at 240nm. The rate must be measured within the linear portion of the absorbance curve.

Absorbance sample : A_s/min
blank : A_b/min

$$0.010 \text{ Abs/min} \leq \Delta A/\text{min} = (A_s/\text{min} - A_b/\text{min}) \leq 0.060 \text{ Abs/min}$$

■ Calculation

$$\text{Activity (U/ml)} = \frac{\Delta A/\text{min}}{12.2} \times \frac{3.10}{0.05} \times D$$

- 12.2 : millimolar extinction coefficient of Δ^4 -Cholesterol-3-one at 240 nm ($\text{cm}^2 / \mu\text{mole}$)
3.10 : final volume (ml)
0.05 : volume of enzyme solution (ml)
D : times of dilution in enzyme solution

Storage

Storage at -80°C in the presence of a desiccant is recommended. Enzyme activity will be retained for at least one year under this condition.

References

1. Richmond, W. (1973) Clin. Chem., **19**, 1350.
2. Flegg, H. M. (1973) Ann. Clin. Biochem., **10**, 79.
3. Alain, C. C. et. al. (1973) Clin. Chem., **20**, 470.
4. Tarbutton, P. N. and Gunter, C. R. (1974) Clin. Chem., **20**, 724.
5. Nomoto, S. (1976) Rinsho Kensa, **20**, 688.
6. Kamenno, K., Nakano, N. and Baba, S. (1976) Jap. J. Clin. Path., **24**, 650.

CON II 活性測定法 (Japanese)

I. 試薬液

1. 基質溶液 (6mM コレステロール溶液)
コレステロール 232mg をイソプロパノールに溶解して全容 100ml とする。
2. 酵素溶解希釈用液
0.05% (W/V) トリトン X-100 を含む
0.1M KH_2PO_4 - Na_2HPO_4 緩衝液 pH7.0
3. 試薬
コレステロール : ナカライテスク社製 特級 #08721
トリトン X-100 : Dow Chemical 社製

II. 酵素試料液

検品 0.5ml を酵素溶解希釈用液で 40 倍に希釈する。その液を酵素溶解希釈用液で約 0.1-0.2U/ml 濃度となるように適宜希釈する。

III. 測定操作法

1. 小試験管に酵素溶解希釈用液 3.0ml と酵素試料液 50 μl を正確に加え 37°C で予備加温する。
※盲検は酵素試料液の代りに酵素溶解希釈用液 50 μl を加える。

2. 5 分経過後、基質溶液 50 μl を正確に加えて混和し、37°C で反応を開始する。
3. 反応開始後、240nm における吸光度を測定して直線的に反応している 1 分間当たりの吸光変化を求める。求められた吸光度変化を試料液は A_s/min 、盲検液は A_b/min とする。
 $0.010 \text{ Abs/min} \leq \Delta A/\text{min} = (A_s/\text{min} - A_b/\text{min}) \leq 0.060 \text{ Abs/min}$

IV. 計算

$$\text{活性 (U/ml)} = \frac{\Delta A/\text{min}}{12.2} \times \frac{3.10}{0.05} \times D$$

- 12.2: Δ^4 -コレステレン-3-オンの 240nm におけるミリモル分子吸光係数 ($\text{cm}^2 / \mu\text{mole}$)
3.10: 反応総液量 (ml)
0.05: 反応に供した酵素試料液量 (ml)
D : 酵素試料液の希釈倍率