

OSOM® Trichomonas Positive Control Kit

Каталог нөмірі 182

ПАЙДАЛАНУ МАҚСАТЫ

OSOM® Trichomonas Positive Control Kit OSOM Trichomonas Rapid Test сынағымен сапаны бақылау сынағындағы *in vitro* диагностикалау кезінде пайдалануға арналған.

ҚЫСҚАША СИПАТТАМА

OSOM Trichomonas Positive Control Kit құрамында Trichomonas антигендері бар кептірілген қоспамен қапталған тампондарды қамтиды. Тампонға жағылған Trichomonas антигенінің деңгейі OSOM Trichomonas Rapid Test сынағымен пайдаланылған кезде оң нәтиже беру үшін жеткілікті. Trichomonas Rapid Test жинағында берілген вискозадан жасалған стерильді тампондарда Trichomonas антигендері жоқ және оларды теріс бақылау құралдары ретінде пайдалануға болады. Бұл бақылау құралдары OSOM Trichomonas Rapid Test сынағында сапаны бақылау үшін пайдаланылған кезде, сынақты және оператор өнімділігін тексеруге көмек ретінде пайдалы.

БЕРІЛГЕН МАТЕРИАЛДАР

OSOM Trichomonas оң бақылау тампондары (шамамен 1 x 10⁵ жасуша баламалары)- *Trichomonas vaginalis* ағзаларынан алынған антиген қоспасымен қапталған 10 полиэстер жағынды.

ҚАЖЕТТІ МАТЕРИАЛДАР (ЖИНАҚПЕН БІРГЕ БЕРІЛМЕЙДІ)

- OSOM Trichomonas Rapid Test
- Сағат немесе Таймер

ЕСКЕРТУЛЕР ЖӘНЕ САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

1. Бақылау құралдарын жарамдылық мерзімі аяқталғаннан кейін ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ.
2. Потенциалды биологиялық қауіп-қатер. Жұқпалы болуы ықтимал етіп қарастырып, өңдеңіз. Бұл өнімді тиісті сақтық шараларын пайдалана отырып, тиісінше белгіленген зертханалық тәжірибеге сәйкес өңдеңіз.
3. Емделуші қолданысына арналмаған.

САҚТАУ

- OSOM Trichomonas Positive Control Kit бөлме температурасында сақталуы қажет (15 – 30°C; 59 – 86°F).
- Оң бақылау тампондары бұзылмауы үшін, пайланғаннан кейін контейнерді мықтап жабыңыз.

ТҰРАҚТЫЛЫҚ

Жабық контейнерде 15 – 30°C (59 – 86°F) аралығындағы температурада сақталатын тампондар контейнерде және қорап жапсырмасында көрсетілген жарамдылық мерзімі өткенге дейін тұрақты.

ПАЙДАЛАНУ НҰСҚАУЛЫҒЫ

OSOM Trichomonas оң бақылау тампондарын OSOM Trichomonas Rapid Test сынағына арналған процедураға сәйкес емделуші үлгісі ретінде пайдаланыңыз. Сынақ жүргізудің алдында, талданатын өнімнің қосымша бетінен әдістемелік нұсқауларды оқып шығыңыз.

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР

Теріс бақылау құралы талданатын өнімнің қосымша бетінің "Сынақ нәтижелерін түсіндіру" бөлімінде сипатталғандай теріс нәтиже беру керек. Оң бақылау құралы талданатын өнімнің қосымша бетінің "Сынақ нәтижелерін түсіндіру" бөлімінде сипатталғандай оң нәтиже беру керек.

МАТЕРИАЛДАРДЫ ҚОҚЫСҚА ТАСТАУ

Қауіпті немесе биологиялық ластанған материалдарды мекемеңіздегі тәжірибелерге сәйкес қоқысқа тастаңыз. Барлық материалды қауіпсіз және тиімді түрде барлық мемлекет, аймақ, және жергілікті талапқа сәйкес қоқысқа тастаңыз.

ҚАЙТА ТАПСЫРЫС БЕРУ

№181 - OSOM Trichomonas Rapid Test (25 сынақ)

№181E - OSOM Trichomonas Rapid Test (25 сынақ) CE белгісі қойылған

№182 - OSOM Trichomonas Positive Control Kit CE белгісі қойылған

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР /

Осы талдау туралы қосымша ақпарат алу үшін OSOM Trichomonas Rapid Test бағыттаушы қосымша парақты қараңыз.

OSOM® — Sekisui Diagnostics, LLC компаниясының тіркелген АҚШ сауда белгісі.

БЕЛГІЛЕРІ

EC REP Еуропалық қоғамдастықтағы өкілетті өкіл

LOT Топтама коды

REF Каталог нөмірі

i Пайдалану нұсқаулығын қараңыз

Σ n <n> сынағы үшін жеткілікті мөлшерден тұрады

IVD In Vitro диагностикалық медициналық құрылғысы

▲ Өндіруші


CONTROL + Қалыпты басқару

🌡 Температура шегі

🕒 Қолдану мерзімі



SEKISUI Diagnostics, LLC
6659 Top Gun Street
San Diego CA 92121 USA

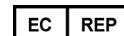

MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover
Germany



SEKISUI
DIAGNOSTICS

www.sekisuidiagnostics.com
800 332-1042 (U.S. only)